



# CARY Base

## Käyttöohje

Art. nr: 508900

Ohjelmistoversio 1.3.0 tai uudempi



# Sisällysluettelo

<b>Johdanto</b> .....	<b>4</b>
Tietoja CARY Base .....	4
Käyttötarkoitus .....	4
Tietoja tästä asiakirjasta .....	4
<b>Tuotetta CARY Base koskeva yleiskatsaus</b> .....	<b>5</b>
<b>Aloita tuotteen CARY Base käyttö</b> .....	<b>6</b>
Sijoita CARY Base kotiin .....	6
Käynnistä CARY Base .....	6
Aseta CARY Base .....	6
<b>Käytä tuotetta CARY Base</b> .....	<b>7</b>
Käytä Päänäyttöä .....	7
Käytä muistutuksia .....	7
Muuta puhutuen äänenvoimakkuutta .....	7
Vuorokaudenajat .....	8
<b>Mukauta CARY Base</b> .....	<b>8</b>
Siirry Virtavalikkoon .....	8
Muuta asetuksia .....	9
Valitse näytön tiedot .....	10
Hallitse kalenteria .....	12
Yhdistä ulkoinen laite .....	15
<b>Huolto</b> .....	<b>16</b>
Tarkista uudet ohjelmaversiot .....	16
Palauta CARY Base tehdasasetukset .....	16
Puhdista CARY Base .....	16
<b>Vianetsintä</b> .....	<b>17</b>
<b>Varastointi ja hävittäminen</b> .....	<b>18</b>
<b>Tuotetiedot</b> .....	<b>19</b>
<b>Tärkeää tietoa</b> .....	<b>20</b>
Turvallisuusmääritelmät .....	20
<b>Yhteystiedot</b> .....	<b>23</b>

# Johdanto

## Tietoja CARY Base

CARY Base on kalenterikello niille, jotka tarvitsevat lisäapua päivän seuraamiseen ja asioiden muistamiseen. Näytössä näkyy päivämäärä, viikonpäivä, kellonaika ja onko kyseessä aamu, päivä, ilta vai yö. Voit lukea tiedot napauttamalla näyttöä tai käyttämällä ohjauskytkintä.

Käyttäjän päivittäiset aktiviteetit voidaan näyttää näytöllä ja hänelle voidaan antaa henkilökohtaisia muistutuksia haluttuina aikoina. Kalenteria hallinnoidaan suoraan laitteella tai etänä verkkopalvelun myAbilia kautta.

Näytössä näkyvien tietojen määrää voidaan vähentää käyttäjän tarpeiden mukaan ja kieli voidaan asettaa joksikin monista käytettävissä olevista kielistä.

## Käyttötarkoitus

CARY Base on kalenterikello, joka on tarkoitettu avuksi henkilöille, joilla on aikaorientaatio- ja muistihäiriöitä.


CARY Base on tarkoitettu sisäkäyttöön kotiympäristössä.

## Tietoja tästä asiakirjasta

 Lue ennen tuotteen käyttöä tärkeät tiedot sivulla 20.

Opit tämän asiakirjan avulla, miten käynnistät tuotteen CARY Base ja mukautat sen sitä käyttävän henkilön tarpeisiin.

# Tuotetta CARY Base koskeva yleiskatsaus

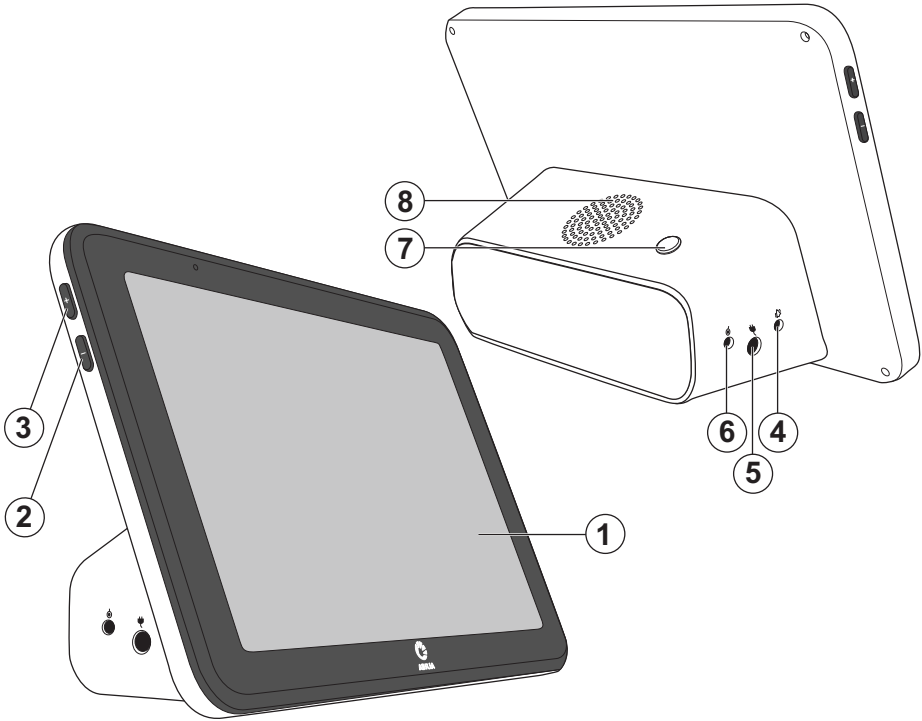

1. Kosketusnäyttö
2. Äänenvoimakkuus –
3. Äänenvoimakkuus +
4. Relelähde muistutussignaalin välittämiseksi eteenpäin
5. Virtaliitin
6. Kytkintulon liitântä (lisävaruste)
7. Virtapainike
8. Kaiutin

## Mukana toimitetut osat

- CARY Base
- Verkkosovitin

## Mukana toimitettavat asiakirjat


- Käyttöohje (tämä asiakirja)

# Aloita tuotteen CARY Base käyttö

**VAROITUS:** Älä käytä tuotetta CARY Base kun se on vaurioitunut.


## Sijoita CARY Base kotiin


Päätä, mihin haluat sijoittaa tuotteen CARY Base kotona. Sijoita se sellaiseen paikkaan, josta se näkyy helposti, kuten keittiön pöydälle. Varmista, ettei näytölle tule heijastumia valoista tai ikkunoista.

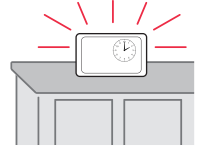


## Käynnistä CARY Base

**VAROITUS:** Käytä vain tuotteen CARY Base mukana toimitettua virtasovitinta.

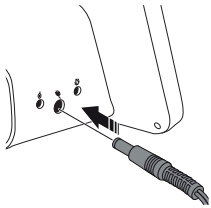

1. Kytke liitin  
virtapistokkeeseen,  
jossa on merkintä .

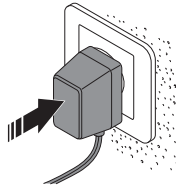

2. Kytke virtasovitin  
pistorasiaan.

## Aseta CARY Base

Kun käynnistät tuotteen CARY Base ensimmäisen kerran, sinua opastetaan asettamaan haluamasi kieli, päivämäärä ja kellonaika. Halutessasi voit myös muuttaa näytössä näkyviä tietoja.

Jos haluat lisätietoja, katso *Muuta asetuksia* sivulla 9.

# Käytä tuotetta CARY Base

**VAROITUS:** Älä käytä tuotetta CARY Base kun se on vaurioitunut.

## Käytä Päänäyttöä

- Katso päivämäärä ja kellonaika näytöltä.
- Katso päivän aktiviteetit.  
Se on käytettävissä vain silloin, kun asetuksissa on otettu käyttöön päiväsuunnitelma.
- Napauta näyttöä, kun haluat kuulla tiedot.

Se on käytettävissä vain silloin, kun valitsemallasi kielellä on puhetuki ja puhetuki on otettu käyttöön asetuksissa.



## Käytä muistutuksia


Kun aktiviteetti alkaa, näkyviin tulee muistutus. Jos et sulje muistutusta itse, se sulkeutuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

- Voit pysäyttää muistutussignaalin napauttamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
- Voit toistaa muistutusviestin napauttamalla Toista.
- Voit sulkea muistutuksen napauttamalla OK.



## Muuta puhetuen äänenvoimakkuutta

Muuta puhetuen äänenvoimakkuutta painamalla tuotteen CARY Base sivulla olevia plus- ja miinuspainikkeita.

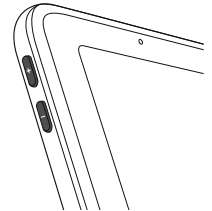

## Vuorokaudenajat

CARY Base näyttää vuorokaudenajat. Vuorokaudenaikoja voidaan muuttaa, katso *Muuta asetuksia* sivulla 9.

Vuorokaudenajat on esiohjelmoitu seuraavasti:

- Varhainen aamu: 06:00–10:00
- Aamupäivä: 10:00–12:00
- Iltapäivä: 12:00–17:00
- Ilta: 17:00–22:00
- Yö: 22:00–06:00


Yöaikana näytön kirkkaus himmenee automaattisesti. Jos Tumma tausta on päällä, taustan väri on yöaikana tumma.

**KÄRKI:** Voit sammuttaa näytön painamalla virtapainiketta. Näyttöön syttyy valo, kun muistutus tulee.


## Mukauta CARY Base

### Siirry Virtavalikkoon

Pääset Virtavalikosta Asetuksiin ja Kalenteriin. Voit myös sammuttaa tuotteen CARY Base tästä valikosta.

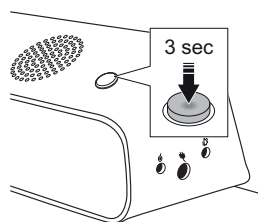


1. Pidä virtapainiketta painettuna.

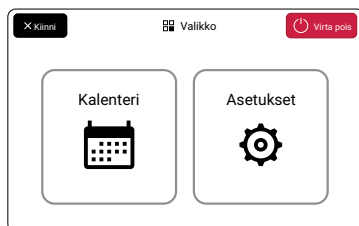




2. Virtavalikko aukeaa.




## Muuta asetuksia

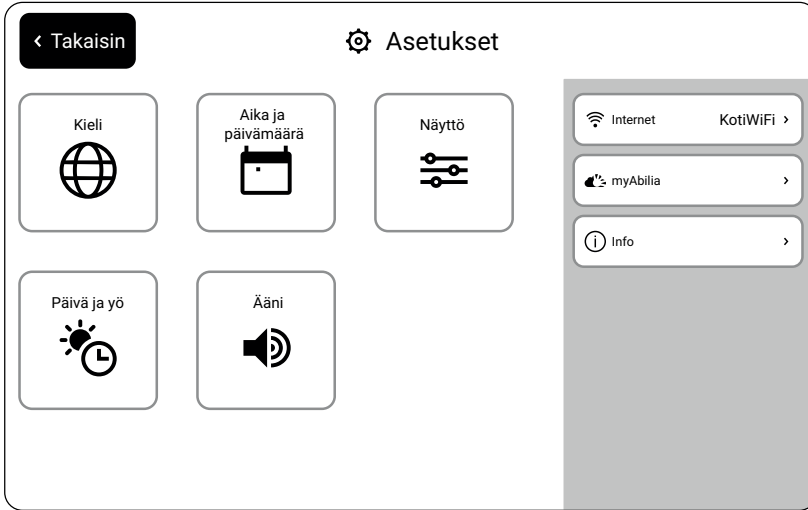
Jos haluat muuttaa tuotteen CARY Base asetuksia, siirry Virtavalikkoon ja napauta .




 **Kieli**  
Valitse kieli. Merkinällä  merkityillä kielillä on puhetuki.


 **Aika ja päivämäärä**  
Aseta päivämäärä ja aika.

 **Näyttö**  
Katso *Valitse näytön tiedot* sivulla 10.


 **Päivä ja yö**  
Muuta vuorokaudenaikoja, aseta näytön kirkkaus ja ota käyttöön Tumma tausta.

**ESIMERKKI:** Aseta aamun alkamisajaksi normaali heräämisaikasi.

 **Ääni**  
Mukauta puhetuki ja muistutussignaali.



 **Internet** (valinnainen)  
Yhdistä internetiin, jotta:

- Saat päivämäärän ja ajan automaattisesti.
- Käytät tuotetta myAbilia.

 **myAbilia** (valinnainen)  
Päivitä kalenteri etänä, katso *Etätuki tuotteella myAbilia* sivulla 14.

 **Info**  
Katso *Tarkista uudet ohjelmaversiot* sivulla 16.

## Valitse näytön tiedot

Voit valita näytössä näytettävät tiedot menemällä Virtavalikkoon ja napauttamalla  ja napauttamalla sitten .



8:00

### ***Digitaalinen kello***

Näytä tai piilota digitaalinen kello.



### ***Vuorokaudenaika***

Näytä tai piilota vuorokauden aika, kuten aamu tai ilta. Vuorokaudenajat asetetaan kohdassa Päivä ja yö, katso *Muuta asetuksia* sivulla 9.



### ***Analoginen kello***

Näytä tai piilota analoginen kello.



### ***Minuutteja***

Näytä tai piilota minuuttimerkit.



### ***Päivämäärä***

Näytä tai piilota päivämäärä.



### ***Viikonpäivä***

Näytä tai piilota viikonpäivä.



### ***Päiväsuunnitelma***

Näytä tai piilota Päiväsuunnitelma sekä päivän aktiviteetit.



### ***Kalenteri***

Näytä tai piilota

Kalenteripainike, katso

*Hallitse kalenteria* sivulla 12.



### ***Päivävärit***

Näytä tai piilota päivävärit

Päiväsuunnitelmassa ja



kalenterissa.

**KÄRKI:** Kun näytön tietomäärää vähennetään, CARY Base on vielä yksinkertaisempi ja selkeämpi.


## Hallitse kalenteria


**VAROITUS:** Älä käytä tuotetta CARY Base ainoana lääkityksen, lääketieteellisen hoidon tai muiden tärkeiden aktiviteettien tukena.


### Päivitä Kalenterinäköymä

Voit päivittää Kalenterin siirtymällä Virtavalikkoon. Napauta  ja napauta sitten , tai napauta Kalenteripainiketta. Päänäkymässä (jos käytettävissä).


Kaikki aktiviteetit on lueteltu siinä kronologisessa järjestyksessä päivää kohti. Aiemmat aktiviteetit on yliviihattu luettelossa.

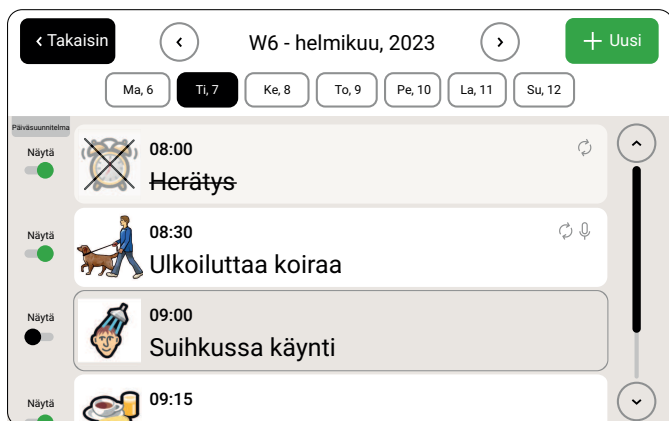


 **Valitse päivä**  
Napauta päivää, jotta näet sen aktiviteetit.

 **Päiväsuunnitelma**  
Ilmaisee, näytetäänkö aktiviteetti päiväsuunnitelmassa.

 **Edellinen viikko**  
Siirry edelliseen viikkoon.

 **Lisää aktiviteetti**  
Katso *Lisää aktiviteetti* vastakkaisella sivulla. Jos haluat muuttaa tai poistaa aktiviteetin, katso *Muokkaa aktiviteettia tai poista se* sivulla 14.


 **Seuraava viikko**  
Siirry seuraavaan viikkoon.


**KÄRKI:** Rajoita päiväsuunnitelman aktiviteettien määrää käyttäjälle tärkeiden aktiviteettien korostamiseksi.


## Lisää aktiviteetti

Voit lisätä aktiviteetin siirtymällä Kalenteriin, katso *Siirry Virtavalikkoon* sivulla 8.


**Nimi** Nimi, joka näkyy Päiväsuunnitelmassa. Pidä se kuvailevana ja lyhyenä.  
**Kuvaus** Lisätiedot, jotka esitetään muistutuksessa.


 **Päivämäärä**  
Aktiviteetin päivämäärä.


 **Aika**  
Aika, jolloin aktiviteetti alkaa.


 **Toistuminen**  
Toistetaanko aktiviteetti ja miten se toistetaan.

**ESIMERKKI:** Ulkoiluta koira joka päivä tai syntymäpäivät kerran vuodessa.

 **Näytä Päiväsuunnitelmassa**  
Näytetäänkö aktiviteetti päivän päiväsuunnitelmassa vai ainoastaan muistutuksena.

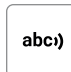 **Näytä teksti hälytyksen aikana**  
Nimi ja kuvaus luetaan ääneen, kun muistutus käynnistyy.

 **Tallenna viesti**  
Viesti näytetään, kun muistutus käynnistyy. Se ei ole mahdollista, jos Näytä teksti on päällä.

 **Lisää kuva**  
Valitse kirjastosta kuva havainnollistaaksesi tehtävää. Omien valokuvien käyttäminen, katso *Etätuki tuotteella myAbilia* sivulla 14.

## Muokkaa aktiviteettia tai poista se

Voit muokata aktiviteettia tai poistaa sen siirtymällä Kalenteriin, katso *Siirry Virtavalikkoon* sivulla 8. Napauta aktiviteettia, jota haluat muokata tai jonka haluat poistaa.

✕ Peruuta
✎ Muokkaa toimintaa
✓ Tallenna

Kuva



↻ Muuta
🔴 Poista

Nimi

Lounas >

Kuvaus

Ota luottokortti mukaasi. >

📎 Tallenna viesti
0:23 sec >

📅 Päivämäärä 07-03-2023 >


🕒 Aika 11:45 >

🔄 Toistuminen Single >


📄 Näytä päiväsuunnitelmassa

abc) Toista teksti hälytyksessä

🗑️ Poistaa


 **Muuta**  
Vaihda nykyinen kuva.



 **Poista aktiviteetti**  
Poista aktiviteetti.

 **Poista**  
Poista nykyinen kuva.

## Etätuki tuotteella myAbilia

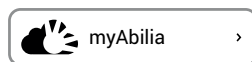Voit päivittää tuotteella myAbilia kalenterin etätoimintona ja lisätä kuvia kuvakirjastoon.



Voit muodostaa yhteyden tuotteiden CARY Base ja myAbilia välille menemällä Virtavalikkoon, napauttamalla  ja napauttamalla sitten . Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Jos sinulla ei ole myAbilia käyttäjätiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa [myabilia.com](https://myabilia.com). Tarvitset siihen sähköpostiosoitteen.

## Yhdistä ulkoinen laite

Seuraavat ulkoiset laitteet voidaan kytkeä laitteeseen CARY Base:

- *Ohjauskytkin*


Käytetään näytön napauttamisen sijasta.

Esimerkiksi äänituen saamiseen tai muistutusten poistamiseen käytöstä. Kytke

ohjauskytkin  -liitäntään.

- *Muistutussignaalin lähetyslaite*

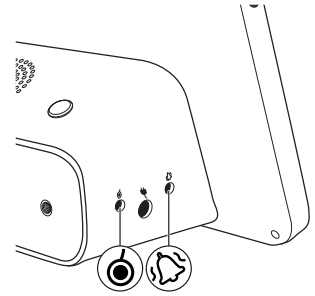

Esimerkiksi värinäilytys tai merkkivalo. Kytke laite relelähtöön .



Pyydä lisätietoja ulkoisista laitteista tuotteen jälleenmyyjältä, katso [www.abilia.com/en/abilias-world/distributors](http://www.abilia.com/en/abilias-world/distributors).



## Huolto

### Tarkista uudet ohjelmaversiot

1. Siirry Virtavalikkoon.
2. Napauta .
3. Napauta .
4. Napauta Tarkista päivitykset.
5. Jos uusi versio on olemassa, napauta Päivitä.

### Palauta CARY Base tehdasasetukset

Joudut ehkä palauttamaan tuotteen CARY Base tehdasasetukset, kun kunnostat sitä tai etsit siitä vikaa. Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki asetukset ja henkilökohtaiset tiedot.

1. Siirry Virtavalikkoon.
2. Napauta .
3. Napauta .
4. Napauta Tehdasasetusten palautus.

### Puhdista CARY Base

Puhdista CARY Base hieman kostealla liinalla ja laimealla pesuaineella.

CARY Base voidaan puhdistaa alkoholilla.



## Vianetsintä


Jos tarvitset CARY Base -tuotetukea, katso tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta *Yhteystiedot* tai mene sivustolle [www.abilia.com/intl/manuals](http://www.abilia.com/intl/manuals).

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Asetettu muistutus ei kuulu.	Laitetta ei ole kytketty päälle.	Katso ohjeet kohdasta <i>Käynnistä CARY Base</i> sivulla 6.
	Muistutuksen äänenvoimakkuus on asetettu 0:ksi.	Lisää muistutusten äänenvoimakkuutta, katso <i>Muuta asetuksia</i> sivulla 9.
Kello näyttää väärän ajan.	Kelloa ei ole synkronoitu.	Yhdistä Internetiin.
		Aseta aika manuaalisesti, katso <i>Muuta asetuksia</i> sivulla 9.
Näytön kirkkaus on yöllä liian voimakas.	Tumma tausta -asetus ei ole käytössä.	Kytke tumma tausta päälle, katso <i>Muuta asetuksia</i> sivulla 9.
Näyttö valaistuu liian aikaisin.	Vuorokaudenaikoja ei ole asetettu halutuiksi.	Muuta vuorokaudenajat, katso <i>Vuorokaudenajat</i> sivulla 8.
En voi tallentaa aktiviteettiviestiä.	Näytä teksti hälytyksen aikana -asetus on asetettu asentoon Päälle.	Aseta Näytä teksti hälytyksen aikana aktiivisuuden osalta asentoon Pois päältä.
En pysty tarkistamaan päivityksiä.	CARY Base ei ole yhdistetty Internetiin.	Yhdistä Internetiin, katso <i>Muuta asetuksia</i> sivulla 9.
Tuote ei toimi oikein.		Sammuta CARY Base ja käynnistä se uudelleen, katso <i>Siirry Virtavalikkoon</i> sivulla 8.
		Palauta tehdasasetukset, katso <i>Palauta CARY Base tehdasasetukset</i> sivulla 16.
		Ota yhteyttä tukeen.

## Varastointi ja hävittäminen

Säilytä tuote huoneenlämpötilassa ja kosteudelta suojattuna.

**HUOMAA:** Katkaise virta tuotteesta CARY Base ennen virtakaapelin irrottamista.

Kytke virta tuotteesta CARY Base pois menemällä Virtavalikkoon ja napauttamalla .

Tuotteen CARY Base asetukset säilyvät noin vuoden ajan. Jos tuotetta CARY Base on varastoitu pitemmän ajan, asetukset on tehtävä uudelleen.



Tuotteessa on elektronisia osia, jotka on kierrätettävä. Vie tuote hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen.

# Tuotetiedot

## CARY Base

Mitat, K × L × S	137 x 207 x 74 mm
Paino	520 g
Näyttö	8", resoluutio 1280 x 800
Virtalähde	5 V 2 A
Virrankulutus	Maks. 10 m
Vara-akku	1 x CR2032 3 V ja 1 x 2000 mAh 3,7 V
Kaiutin	Maks. 82 dB 1 metrin päässä
Verkko	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 / 5 GHz
Bluetooth®	Bluetooth v4.2
Käyttöjärjestelmä	Android 8.1
IP-luokka	IP31:
Käyttöympäristö	+5 – +35 °C. Suurin 90 % suhteellinen kosteus
Kytkintulon liitântä	3,5 mm
Relelähdtö muistutussignaalin välittämiseksi eteenpäin	3,5 mm
Arvioitu käyttöikä	5 vuotta

## Lisätarvikkeet

Tuotteeseen CARY Base on saatavana seuraavat lisävarusteet:

- Verkkosovitin
- Ulkoiset kytkimet

Lisätietoja tuotteesta CARY Base ja lisävarusteista löydät osoitteesta [www.abilia.com](http://www.abilia.com) tai skannaamalla QR-koodin.




**Skannaa  
minut!**

## Tärkeää tietoa

Lue ja ymmärrä tämän käyttöohjeen sisältö ennen tuotteen käyttöä.

### Turvallisuusmääritelmät

 **VAROITUS:** Loukkaantumis- tai hengenvaara, jos annettuja ohjeita ei noudateta.

 **VAROVAISUUTTA:** Tuotteen vaurioitumisen vaara, jos ohjeita ei noudateta.

**HUOMAA:** Tiedot, jotka tarvitaan määrättyssä tilanteessa.

**OHJE:** Lisätietoja, jotka voivat parantaa tuotteen käyttöä.

### Käyttöä koskevat turvallisuusohjeet

 **VAROITUS:** Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa.

- Käytä vain tuotteen CARY Base mukana toimitettua virtasovitinta.
- Älä käytä tuotetta CARY Base ainoana lääkkityksen, lääketieteellisen hoidon tai muiden tärkeiden aktiviteettien tukena.
- Älä käytä tuotetta CARY Base kun se on vaurioitunut.

### Vakavat tapahtumat

Jos tuotetta käytettäessä tapahtuu vakava tapahtuma, siitä on ilmoitettava valmistajalle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Tapahtuma on vakava, jos sen katsotaan olevan suoraan tai epäsuorasti johtanut, voivan johtaa tai esittää johtavan potilaan, käyttäjän tai muun henkilön kuolemaan, potilaan, käyttäjän tai henkilön terveydentilan tilapäiseen tai pysyvään tai vakavaan heikkenemiseen tai vakavaan uhkaan kansanterveydelle.

## **Lääkinnällisiä laitteita koskevien vaatimusten mukaisuus**

Tuotetta CARY Base markkinoidaan teknisenä apuvälineenä toimintarajoitteisille ihmisille, ja se täyttää kaikki lääkitäisille laitteille asetetut vaatimukset, määräykset ja direktiivit.

### **Tuotevastuu**

Tuote on kehitetty ja sen riskiarviointi on tehty standardin ISO 14971 mukaisesti. Käyttöohjeet ja tekniset tiedot on laadittu riskianalyyssissä tehtyjen turvallisuusarviointien mukaisesti. Ota turvallisuus huomioon aina tuotetta käyttäessäsi. Abilia AB ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käytöstä tai asennuksesta. Tuotteen vaurioittaminen tai muuttaminen mitätöi takuun ja sulkee pois valmistajan vastuun. Tuotteen arvioitu käyttöikä pitää paikkansa, kun tuotetta käytetään sen käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.



# Yhteystiedot

## **Ruotsi**

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Ruotsi  
Puhelin +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

## **Norja**

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norja  
Puhelin +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

## **Yhdistynyt kuningaskunta**

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, Yhdistynyt kuningaskunta  
Puhelin +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

## **Kansainvälinen**

[www.abilia.com/intl/get-products/distributors](http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors)

CE

508900\_Käyttöohje\_CARY Base\_FI, helmikuu 2023



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Ruotsi  
Puhelin +46 (0)8- 594 694 00 | [info@abilia.com](mailto:info@abilia.com) | [www.abilia.com](http://www.abilia.com)



ABILIA